

**new**

**zeta 3 wipes** **POP-UP**  
SURFACES

**NOWE ROZWIĄZANIE DO EFEKTYWNEJ DEZYNFEKЦИИ, DEZODORYZACJI I CZYSZCZENIA POWIERZCHNI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH**



### WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

- ✓ Duże, grubsze chusteczki: mycie i dezynfekcja dużych powierzchni w krótszym czasie i przy zużyciu mniejszej ilości chusteczek
- ✓ Szerokie spektrum działania
- ✓ Duża odporność, miękki i zwarty materiał
- ✓ Niezwykle niska zawartość alkoholu (<3%): bezpieczne dla dezynfekowanych powierzchni, także dla tych z najdelikatniejszych materiałów
- ✓ Przyjemny, świeży zapach mięty
- ✓ Oszczędność miejsca, praktyczne miękkie opakowanie
- ✓ Testowane dermatologicznie
- ✓ Materiał medyczny klasy IIa zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG dla wyrobów medycznych

**Clinical**  
Surface disinfectants

**Zhermack**  
CLINICAL



# zeta 3 wipes **POP-UP**

## SURFACES

### ZASTOSOWANIE


Idealne do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich powierzchni urządzeń medycznych, również tych najbardziej wrażliwych, takich jak skóra (naturalna lub sztuczna) lub powierzchni z plexi.

### SPOSÓB UŻYCIA


Przetrzyj powierzchnię dokładnie, upewniając się że jest ona dobrze zwilżona i pozostaw do wyschnięcia.



Zdejmij zabezpieczającą folię i wyciągnij chusteczkę Zeta 3 wipes POP-UP.

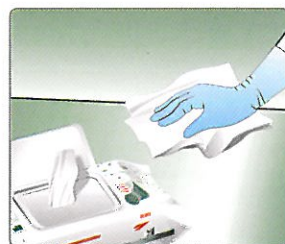

Przetrzyj powierzchnię chusteczką.

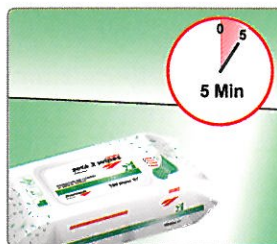

Pozostaw wilgotną powierzchnię przez co najmniej 5 minut aż do wyschnięcia.



Zamknij szczelnie opakowanie.

### SPEKTRUM DZIAŁANIA

**Bakteriobójcze:** EN 1040, EN 1276, EN 14561, EN 13697\*\*

**Grzybobójcze:** (A. niger) EN 1275, EN 13697\*\*

**Grzybobójcze (grzyby drożdżopodobne):** (C. albicans) EN 1275, EN 1650, EN 13624\*\*, EN 13697\*\*

**Wirusobójcze:** \* EN14476 H. Simplex virus (HSV), H1N1\*\*

5 min. w brudnych warunkach środowiska.

\*W ciągu 1 minuty \*\*w czystych warunkach środowiska

### SKŁADNIKI AKTYWNE

Chusteczki  
**Zeta 3 Wipes POP-UP**  
nasączone są:  
roztworem 4rzędowej soli amoniowej  
oraz alkoholem: < 3%



### OPAKOWANIE

C810064

100 szt. chusteczek w miękkim opakowaniu

Więcej informacji na temat tego produktu na stronie internetowej:  
[www.zhermapol.pl](http://www.zhermapol.pl)



### BRANCHES

**GERMANY**  
Zhermack GmbH  
Deutschland  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl  
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0  
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.com

**POLAND**  
Zhermapol Sp. z o.o.  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska  
Tel. +48 - 22 858 82 72  
+48 - 22 858 73 41  
Fax +48 - 22 642 07 14  
biuro@zhermapol.pl  
www.zhermapol.pl

**USA**  
Zhermack Inc.  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195  
Tel. +1 - (877) 819 6206  
+1 - (732) 389 8540  
Fax +1 - (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com

### COUNTRY CONTACTS

**UK AND IRELAND**  
Tel. +44 - (0)7870 690 811  
uk@zhermack.com

**SPAIN**  
Tel. +34 - 900 99 39 52  
info.spain@zhermack.com

**TURKEY**  
Tel. +90 533 76 44 955  
info.turkey@zhermack.com

**FRANCE**  
Tel. +33 - 0800 915 083  
info.france@zhermack.com

**RUSSIA**  
Tel. +7 - 916 930 1191  
info.russia@zhermack.com

**MEXICO AND CENTRAL AMERICA**  
Tel. +52 - 1 55 919 804 97  
info.mexico@zhermack.com

**SOUTH AMERICA**  
Tel. +57 - 310 2601 777  
info.colombia@zhermack.com

### Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY

Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

**Zhermack**  
BEYOND INNOVATION